

*МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
МОДЕЛЬ PR-P003*



**EAC**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП: *Электрический прибор вибромассажный бытового назначения: массажер универсальный.*
- МОДЕЛЬ: PR-P003
- НАПРЯЖЕНИЕ 12В; МОЩНОСТЬ: 30Вт; ВЕС НЕТТО: 2Кг
- НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ: 220В/50Гц 2,5А
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 15-30 МИН
- СРОК СЛУЖБЫ: 5 ЛЕТ
- МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 03.2023

Продукция соответствует Техническим регламентам Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке изделия или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки изделия.
4. Храните изделие в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Во избежании удара электрическим током или выхода изделия из строя, не подключайте и не отключайте изделие влажными руками.
7. Не роняйте и не кладите на изделие тяжелые предметы.

Изготовитель: ВЕНЖУ ПОП РЕЛАКС КО., ЛТД,, NO.57, КАРТОН ИНДАСТРИАЛ ЗОНА, ВУЯНГ, АОДЖАНГ ТАУН, ПИНГЪЯНГ КАУНТИ, ВЕНДЖУ, КИТАЙ.

Страна изготовитель: Китай.

Импортер: ООО "Спина без боли", 119571, Москва, пр-т Вернадского 123/2 офис 9Б интернет сайт: [www.llotus.ru](http://www.llotus.ru), эл.почта: [info@llotus.ru](mailto:info@llotus.ru)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Массажер предназначен для проведения расслабляющего массажа.

- Массаж позволяющий избавиться от накопившейся усталости и стресса.
- Массажер полезен для всех, кто проводит большую часть времени сидя за компьютером или за рулем автомобиля.
- Беря массажер в дорогу, он станет отличным попутчиком и поможет снять напряжение и расслабиться.
- Ролики массажера имитируют движения рук массажиста и производят эффект прекрасного расслабляющего массажа.
- Эффективный массаж способствует усилению кровообращения, что приводит к наполнению клеток кислородом.
- В результате использования массажеры вы можете ощутить прилив сил, бодрости и отличного настроения.
- Массажер может помочь вам расслабиться и провести время с пользой для здоровья в любое время и в любом удобном для вас месте.


1. Массажер эффективно массирует проблемные зоны, воздействует на глубинные слои кожи и мышцы.
2. Легкий, компактный и удобный в эксплуатации массажер для воротникового и поясничного отделов, лодыжек, икроножных мышц, бедер, и области живота.
3. 4-ре массажных ролика имитируют движения рук массажиста.
4. Питание от эл.сети или прикуривателя автомобиля позволяет использовать массажер в автомобиле, дома или в офисе.
5. Прогрев 2-х нефритовых роликов улучшает эффект массажа.
6. Ролики работают в двух направлениях.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

### ПРИМЕНЕНИЕ

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Массажер универсальный.

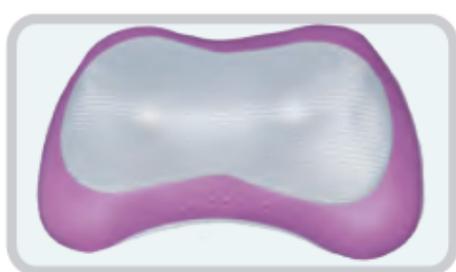

2. Пульт управления.



3. Адаптор.



4. Кабель для прикуривателя.



## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Подключите штекер адаптора к массажеру.
2. Подключите адаптор к розетке эл.питания. Загорится индикатор эл.питания.
3. Включите переключатель режимов на пульте управления в положение 1 (Вперед) или 2 (Назад), чтобы 4 ролика начали вращение в одну или другую сторону.
4. Регулятор скорости позволяет выбрать подходящую скорость вращения массажных роликов.
5. Воздействуйте массажером на участки тела, не оказывайте чрезмерного давления.
6. Для остановки массажера поставьте переключатель режимов в положение "Стоп".
7. Отключите адаптор от эл.розетки.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение массажера универсального PR-P003.

Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием.

**Внимание:** компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное оборудование не является медицинским изделием, предназначено для домашнего использования.

1. Оборудование не является медицинским изделием и не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором, предназначенным для обогрева тела.

2. Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого.

3. При наличии хронических заболеваний или острого болезненного состояния, перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

*Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении нижеперчисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая. Выключите питание, извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.*

1. Если массажер упал и был поврежден или внутрь попала вода.

2. Если поврежден сетевой шнур или вилка.

3. Если присутствует запах гари.

**Во избежание удара электрическим током:**

1. Не используйте массажер во влажном помещении.

2. Не используйте массажер, если у вас мокрые руки.

3. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.

4. Не накрывайте массажер во время использования это может привести к его перегреву и возгоранию.

5. Используйте массажер по назначению.

6. Не садитесь на массажер.

7. Не оказывайте чрезмерное давление на массажер.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

**Не рекомендуется использовать**

*массажер* **в случае:**

- онкологических заболеваний
- острых воспалительных процессов
- нарушений целостности кожи, ран, острых периодов травм
- периодов обострений общих тяжелых заболеваний
- беременности

**Нельзя воздействовать** *массажером* **на следующие области:**

- с варикозным расширением вен
- с тромбофлебитом
- проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов
- на опухших, обожженных, воспаленных или травмированных участках кожи и частях тела
- для массажа лица (глаз), гортани или других особенно чувствительных частей тела
- головы
- сердца
- гениталии.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**В** случае неисправности *массажера* проверьте следующее:

	Причина	Решение
Массажер не работает	1. Массажер не подключен к эл.питанию. 2. Адаптор не подключен к массажеру.	1. Проверьте эл.питание в розетке. 2. Проверьте подключение кабеля к розетке и адаптору.
Массажер останавливается		1. Отключите вилку от эл.питания. Включите снова через 20 минут. 2. Проверьте подключение кабеля к розетке и адаптору.
Шум при работе	В отличие от других подобных моделей универсальный массажер имеет функцию регулировки скорости, что немного увеличивает шум при работе, особенно на малых скоростях.	1. Это естественная работа двигателя.

Если *массажер* не работает после вышеперечисленных попыток устранить неисправность, сделайте следующее:

1. Выключите *массажер* и отключите от эл.питания.
  2. Подождите 60 минут.
  3. Подключите *массажер* к эл.питанию и установите переключатель в положение 1 или 2.
- Если массажер не работает и после этого:
- Выключите питание;
  - Извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром [service@llothus.ru](mailto:service@llothus.ru) или с продавцом для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с момента передачи товара покупателю.

Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования изделия в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю.

В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр [service@l Lotus.ru](mailto:service@l Lotus.ru) или к продавцу, у которого Вы приобрели данное изделие.

НАИМЕНОВАНИЕ:

МОДЕЛЬ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ДАТА ПОКУПКИ:

ПРОДАВЕЦ:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

Заполняется фирмой-продавцом

### Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
6. Гарантия не распространяется на чехол.