

Массажер для ног




**Аппарат для массажа ног
Модель RF-690**

Инструкция по применению



EAC

На ступнях ног находятся рефлекторные зоны почти всех внутренних органов. На ступнях располагается 66 активных точек, 12 меридиан.

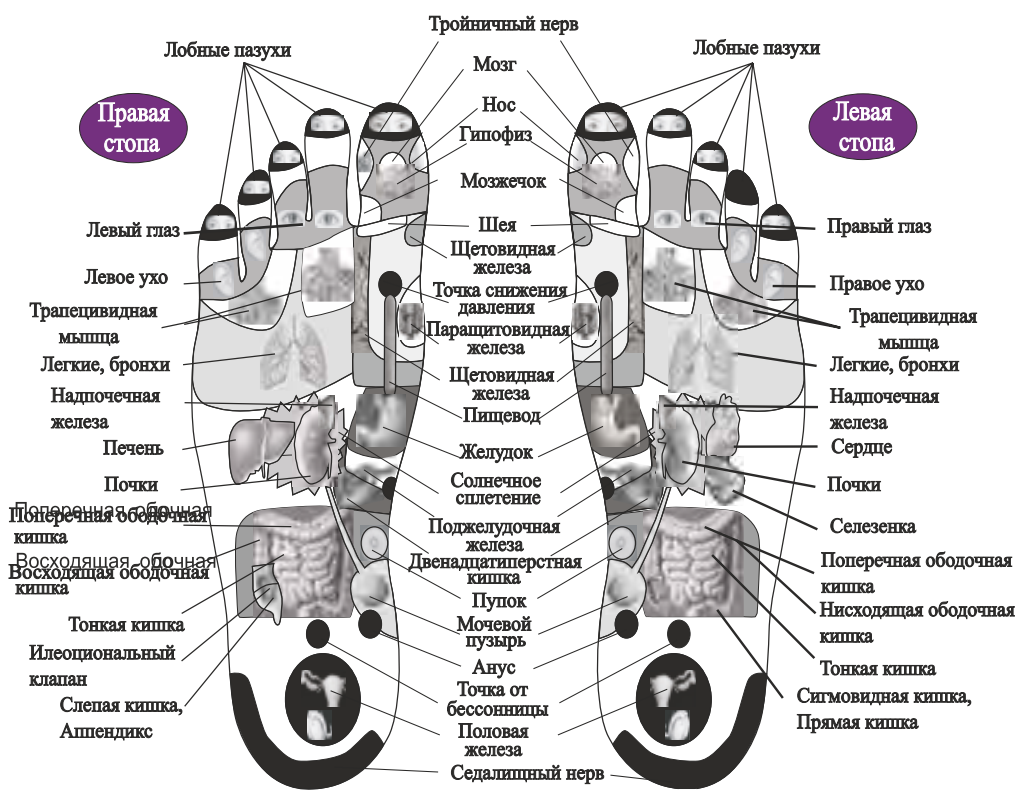



СОДЕРЖАНИЕ

01	Технические характеристики ---	1
02	Назначение -----	1
03	Комплектность -----	2
04	Панель управления -----	2
05	Эксплуатация -----	3
06	Меры предосторожности -----	4
07	Обслуживание и хранение -----	5
08	Гарантия -----	6

Благодарим за приобретение аппарата для массажа ног RF-690 (далее - массажер для ног "Smart+"). Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием. **Внимание:** компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное оборудование не является медицинским изделием, предназначено для домашнего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП:** Электрический прибор вибромассажный бытового назначения: Аппарат для массажа ног
- **МОДЕЛЬ:** RF-690 **СРОК СЛУЖБЫ:** 5 ЛЕТ
- **НАПРЯЖЕНИЕ АДАПТОРА:** 100-220В/24В 50Гц
- **МОЩНОСТЬ:** 50Вт **ВЕС НЕТТО:** 7,5 КГ
- **РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ:** 15 МИН
- **МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 03.2023

Продукция соответствует Техническим регламентам Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

НАЗНАЧЕНИЕ


Аппарат для массажа ног предназначен для проведения расслабляющего массажа ног.

1. Данный массажер воздействует на акупунктурные точки на ступнях для достижения расслабления и возможного снятия усталости с уставших ступней.
2. Массаж верхней и боковой части ступней с подогревом.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Массажер для ног.

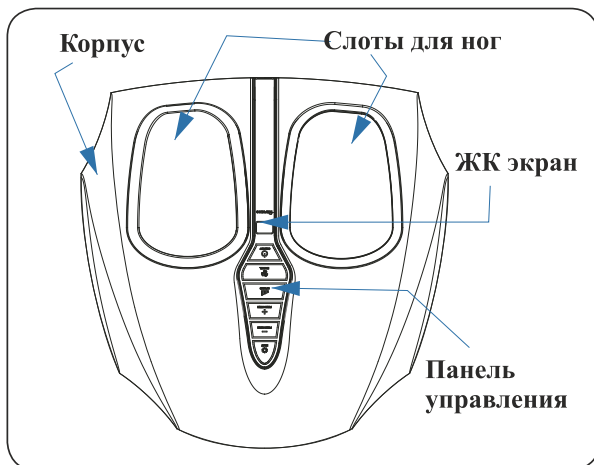

3. Блок питания.




220В

4. Кабель 220В.

5. Инструкция.



2. Панель управления.

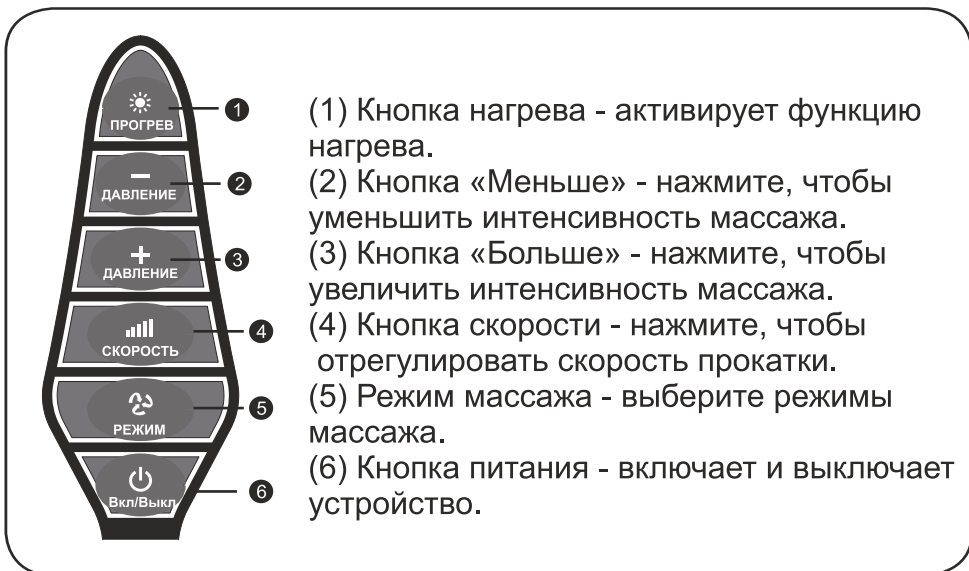



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подсоедините кабель 220В (4) к блоку питания (3). См. раздел «Комплектность» на стр. 2. Подсоедините блок питания к массажеру и кабель 220В к розетке питания 220В.
2. Выберите удобный стул или кресло. Поместите ноги в слоты для ног и расслабьтесь.
3. На панели управления нажмите Кнопку питания (6), чтобы включить массажер. См. раздел «Панель управления» на стр.2. Устройство подаст один звуковой сигнал, и на ЖК экране отобразится «15», а затем начнется обратный отсчет.
4. Массажер начнет работать автоматически. Время работы по умолчанию 15 мин.
5. Всего имеется 3 уровня (P1-P3). Настройкой по умолчанию является уровень 2 с нагревом (кнопка «Режима массажа» (5) будет оставаться СИНЕЙ во время работы, кнопки «Меньше» (2) и «Больше» (3) будут мигать, а Кнопка нагрева будет светиться-нагрев включен).
 - При желании нажмите кнопку «Больше» (3), чтобы перейти на уровень 3 (кнопка «Больше» (3) будет мигать КРАСНЫМ), и на ЖК экране на короткое время отобразится P3.
 - Во время массажа не стесняйтесь менять уровни в соответствии с вашим уровнем комфорта.
 - Чтобы повысить уровень, нажмите кнопку «Больше» (3).
 - Чтобы понизить уровень, нажмите кнопку «Меньше» (2).
 - На ЖК экране кратковременно отобразится выбранный уровень.
6. Вы почувствуете, как давление воздуха увеличивается, а затем снижается во время массажа. Для оптимального массажа вы почувствуете изменение направления и типа массажа. Если вы чувствуете, что определенный уровень слишком высок или слишком низок, используйте кнопки «Больше» (3) и «Меньше» (2) для регулировки уровня. См. пункт 5 в этом разделе.

Существует 3 режима массажных программ:

 - Режим 1: давление воздуха и скорость прокатки роликов работают в установленном режиме по умолчанию, а кнопка Режим массажа (5) будет светиться синим светом.
 - Режим 2: давление воздуха работает так же, как режим 1, скорость прокатки роликов быстрее и кнопка Режим массажа (5) будет светиться красным светом.
 - Режим 3: работает только давление воздуха, функция прокатки роликов не работает и кнопка Режим массажа (5) будет светиться чередующимся синим и красным светом.
7. Чтобы отрегулировать скорость прокатки, нажмите Кнопку скорости (4), скорость ролика изменится с быстрой на медленную.
8. Чтобы выключить нагрев, нажмите Кнопку нагрева (1) (красный индикатор этой кнопки погаснет, указывая на то, что функция нагрева отключена).
9. Чтобы выключить устройство в любое время, просто нажмите Кнопку питания (6). В следующий раз, когда вы снова включите его, он вернется к уровню настроек по умолчанию 2 (P2) — 15 минут.
10. После окончания 15 минут массажа, прозвучит сигнал и на ЖК экране будет отсчет 15 сек (выньте ноги из слот). Кнопки (2) и (5) начнут мигать синим светом. Через 15 сек прозвучит еще 1 сигнал и начнется отсчет 60 сек. Начнется работа обеззараживающих ламп внутри массажера. Кнопки (2) и (5) будут светиться синим светом и будет звучать одиночный сигнал каждые 5 сек. Дисплей будет отсчитывать с 60 секунд до 0. Через 60 секунд прозвучит одиночный сигнал и массажер отключится.
11. Отключите массажер от розетки после использования.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оборудование не является медицинским изделием и не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором, предназначенным проведения общеукрепляющего и расслабляющего массажа.
 2. Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого.
 3. При наличии хронических заболеваний или острого болезненного состояния, перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
 4. Используйте аппарат по назначению.
 5. Используйте массажер сидя. Не вставайте во время его использования и не давите ногами на массажер сильно. Это может значительно замедлить или остановить двигатель, что приведет к перегреву устройства.
 6. Во избежание поражения электрическим током не помещайте мокрые ноги и ступни внутрь устройства.
 7. Не засыпайте, используя массажер.
 8. Не накрывайте массажер во время работы, это может привести к перегреву устройства.
 9. Не отключайте массажер от электрической розетки во время работы. Это может привести к травме.
 10. Не используйте массажер в ванной, где возможен контакт с водой.
 11. Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая. Выключите питание, извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром или с продавцом для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.
- Если аппарат упал и был поврежден или внутрь аппарата попала вода.
 - Если аппарат не правильно работает.
 - Если поврежден сетевой шнур или эл.вилка.
 - Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом при наличии:

- Остеопороза;
- Злокачественных опухолей;
- Беременности или прохождения менструального цикла.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. При чистке аппарата, пожалуйста, используйте сухую салфетку или полотенце. Части, имеющие прямой контакт с кожей можно чистить спиртовой салфеткой. Не используйте бензин или другие растворители для чистки.
2. Храните аппарат в сухом, не пыльном месте. Не подвергайте аппарат воздействию вибрации, высокой температуры и прямых солнечных лучей.
3. Не роняйте аппарат и не кладите на него тяжелые или легко воспламеняющиеся предметы.
4. После охлаждения аппарата, можете упаковать его в полиэтиленовый пакет.
5. При обнаружении каких-либо неисправностей аппарата для массажа ног прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр service@l Lotus.ru.



ГАРАНТИЯ

Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю. В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу, у которого Вы приобрели данное оборудование.

Наименование		ПРОДАВЕЦ:
Серийный номер модели		ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Покупатель		
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		Гарантийный период 1 год с момента передачи покупателю.

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЛИШУИ РЕФЕНГ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛЯНС КО.,ЛТД.

Адрес: N0.295 Лонгкинг Рд., Шуйге Индастриал Парк, Лишуи, Жеджанг, Китай.

Страна изготовитель: Китай.

Импортер: **ООО "Ломос"**, 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.llotus.ru

эл.почта: info@llotus.ru